

PRODUKTKATALOG

MEDIZIN UND PFLEGE



TIGA-MED

IHR KOMPETENTER PFLEGESPEZIALIST



BEKLEIDUNG UND KÖRPERSCHUTZ

Vinyl- & Nitrilhandschuhe, Einmalkittel, Mundschutz, Überschuhe, Esslätzchen, Hauben, Schürzen

Seite 6



MEDIZINISCHE HILFSMITTEL

Sauerstoffartikel, Katheter, Kathetersets, Urinbeutel, Infusion, Transfusion, Einmalspritzen

Seite 16



PFLEGE UND ALLTAG

Mundpflege, Körperpflege, Erste Hilfe, Medikation, Hygieneartikel, Gehstöcke, Nackenkissen

Seite 28



DIAGNOSTIK UND GERÄTE

Stethoskope, Blutdruckmessgeräte, Schwesternuhren, Thermometer, Pulsoximeter, Elektroden, Penlights

Seite 42



Wir, die TIGA-MED Deutschland GmbH, sind ein junges mittelständisches Unternehmen, das sich dem Menschen und seiner Gesundheit verpflichtet fühlt. Ansässig in Thüringen, sind wir nicht nur Ansprechpartner für medizinische Produkte aller Art deutschlandweit, sondern auch in den europäischen Nachbarländern.

Wir bieten Ihnen ein breites und stetig wachsendes Sortiment an Produkten wie Einmalhandschuhe, Schutzkittel, Blutdruckmessgeräte und vieles mehr. Wir liefern beinahe alles – vom Waschhandschuh bis zum Pulsoximeter, vom Mundschutz bis zum Gehstock, vom Infusionssystem bis zum Bewegungstrainer.

Die Qualität unserer medizinischen Produkte und ein Höchstmaß an Service, den wir Ihnen bieten, sind für uns von größter Bedeutung – schließlich wollen wir Ihren Bedürfnissen stets gerecht werden. Neben der hohen Service- und Kundenorientierung sind für uns aber auch von Anfang an nachhaltige und enge Kooperationen mit nationalen und internationalen Handelspartnern wichtig. So haben

wir es geschafft, die mittlerweile renommierte und zuverlässige Handelsmarke TIGA-MED® zu etablieren und stetig weiterzuentwickeln. Unsere intensiven Beziehungen zu Produzenten, Zulieferern und Lieferanten sind außerdem nicht nur erforderliche Grundlage, sondern wertvolles Ergebnis langjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit. Davon profitieren letztlich vor allem auch Sie.

Unser engagiertes Team bietet Ihnen neben optimaler Betreuung vor allem professionelle Beratung und überzeugt Sie tagtäglich im Hinblick auf Kompetenz und freundlichen Kundenservice. Unsere tausendfach bewährte Produktpalette wird Sie genauso begeistern wie unser wirklich unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich von unseren Produkten und günstigen Preisen überzeugen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und sind gern für Sie da.

Ihr 

TIGA-MED

UNSER TEAM

Geschäftsführung & Einkaufsleitung: *Marco Tüshaus*

Qualitätsmanagement: *Stephan Harpeng*

Kundenservice: *Stephanie Scheschonka, Antje Malz, Kristin Gentzsch,
Petra Fiedler, Frank Rudolf, Matthias Groß*



036602 509645



info@tiga-med.de



036602 511981



www.tiga-med.de

Verkaufsleitung: *Dirk Büchenschütz*
Hessen, Saarland,
Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg



0175 5260652



dirk.buechenschuetz@web.de

Heiko Schlegel
Sachsen, Thüringen,
Sachsen-Anhalt,
Berlin, Brandenburg




0176 11111569



heiko.schlegel@tiga-med.de

*Sie haben Fragen, möchten sich beraten lassen oder etwas bestellen?
Dann freut sich unser Team im Außen- und Innendienst über Ihren Anruf.
Während unserer Bürozeiten sind wir montags bis donnerstags zwischen
8 und 15:30 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 14:30 Uhr gern für Sie da.*

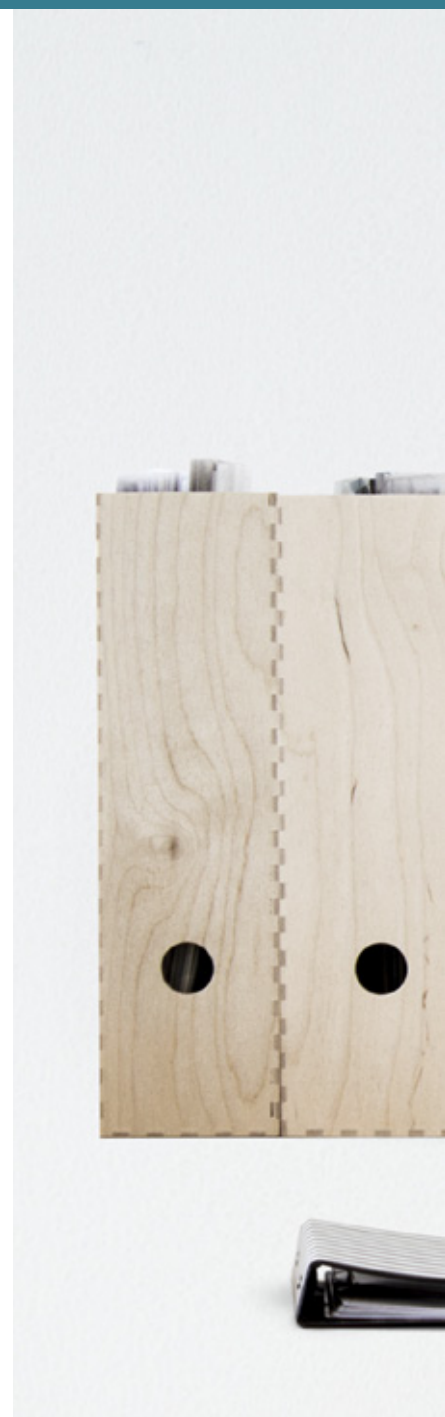



UNSERE TOPANGEBOTE

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  <p>Wies-/Hygienekittel lang, aus PP, Spinnvlies ca. 21g/m², Pack à 10
UVP: 1,19 €
www.tiga-med.de
jetzt: 4,99 €</p> |  <p>Vergloveshandschuhe sterilisiert, Pack à 100 Stück
UVP: 1,19 €
www.tiga-med.de
jetzt: 3,99 €</p> |  <p>Wies-/Handschuhe, ultra-soft, Melton, weiß, Pack à 50 Stück
UVP: 1,19 €
www.tiga-med.de
jetzt: 2,99 €</p> |  <p>Sofort-Kältekompressen, 15 x 15cm
UVP: 1,19 €
www.tiga-med.de
jetzt: 0,99 €</p> |  <p>Elektroakustische TIGA-MED à la base
UVP: 1,19 €
www.tiga-med.de
jetzt: 8,99 €</p> |
|---|---|---|---|--|

BEKLEIDUNG UND KÖRPERSCHUTZ

Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist im medizinischen und pflegerischen Alltag von Personal, Patienten und Besuchern ein unersetzbarer Standard, wenn es darum geht, Kontaminationswege zu minimieren und Infektionsübertragungen zu unterbinden. Unter allen hygienischen Gesichtspunkten sollen jedoch auch Aspekte der Bequemlichkeit eine Rolle spielen. Mit unseren Handschuhen, Kitteln und anderen Bekleidungsartikeln verbinden wir höchste Qualitätsansprüche mit bestem Komfort.





Nitrilhandschuhe

medizinischer Handschuh, gut geeignet für den Umgang mit Chemikalien, Desinfektion und Reinigungsmitteln, hochelastisch, exzellente Passform, mikrogeraute Fingerspitzen für ein sehr gutes Tastempfinden, puderfrei, unsteril, keimdicht, latexfrei, lebensmitteltauglich, erhältlich in blau und schwarz, Rollrand, beidhändig passend, in praktischer Entnahmebox



Nitrilhandschuhe blau

Größe	Artikel-Nr.	Box	Karton	Palette*	PZN
Small (S, ca. 6–6,5)	10000090-Sblau	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	9083186
Medium (M, ca. 7–7,5)	10000090-Mblau	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	9083163
Large (L, ca. 8–8,5)	10000090-Lblau	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	9083157
X-Large (XL, ca. 9–9,5)	10000090-XLblau	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	9083192

*Größenmischung möglich

Nitrilhandschuhe schwarz

Größe	Artikel-Nr.	Box	Karton	Palette*	PZN
Small (S, ca. 6–6,5)	10000090-Sschwarz	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	10106604
Medium (M, ca. 7–7,5)	10000090-Mschwarz	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	10106610
Large (L, ca. 8–8,5)	10000090-Lschwarz	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	10106627
X-Large (XL, ca. 9–9,5)	10000090-XLschwarz	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	10106633

*Größenmischung möglich



NITRIL ODER VINYL?

Nitril ist als künstlicher Ersatz für Latex aus Naturkautschuk ein wirklicher Alleskönner. Er besteht aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR), einem synthetischen Kautschuk. Neben der hohen Materialbeständigkeit ist Nitril auch sehr elastisch und – vor allem ausschlaggebend für ermüdungsfreies Arbeiten und ein hervorragendes Tastempfinden – passt sich den Handkonturen besonders gut an. Aufgrund seiner Beschaffenheit ist Nitril auch resistenter

gegen eine Vielzahl von Chemikalien und stichfester als andere synthetische Einmalhandschuhe, weshalb diese Handschuhe beinahe standardmäßig im medizinischen Bereich und auch in Laboren verwendet werden. Nitril ist zwar ein Kunststoff, wird aber zu großen Teilen aus Erdöl als Grundrohstoff hergestellt. Und genau dies macht Nitrilhandschuhe ähnlich preissensibel wie Handschuhe aus Latex.

Vinylhandschuhe

perfekter Untersuchungshandschuh, flexibel einsetzbar für Kurzzeitanwendungen und bei leichteren Hygieneeinsätzen, glatte Struktur und weiche Haptik, Polymer-Innenbeschichtung für einfaches An- und Ausziehen, puderfrei, unsteril, keimdicht, latexfrei, lebensmitteltauglich, milchig-transparent, Rollrand, beidhändig passend, in praktischer Entnahmebox



Vinylhandschuhe

Größe	Artikel-Nr.	Box	Karton	Palette*	PZN
Small (S, ca. 6–6,5)	10000003-S	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	6839531
Medium (M, ca. 7–7,5)	10000003-M	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	6839548
Large (L, ca. 8–8,5)	10000003-L	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	6839560
X-Large (XL, ca. 9–9,5)	10000003-XL	100 Stück	10 Boxen	63 Karton	6839583

*Größenmischung möglich

Die TIGA-MED® Nitril- und Vinyl-Untersuchungshandschuhe sind selbstverständlich nach den gängigen Normen geprüft und zertifiziert. Unsere blauen und schwarzen Nitrilhandschuhe entsprechen den Anforderungen an Einmalhandschuhe zum Schutz vor Chemikalien und Mikro-Organismen nach DIN EN 374, Teile 1 bis 3. Sowohl die Nitril- als auch die Vinylhandschuhe sind konform mit den Vorgaben für medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455, Teile 1 bis 3. Sie sind nach DIN EN 1186 auch für den Einsatz bei Kontakt

mit Lebensmitteln (für Vinyl unter Ausschluss fettender Lebensmittel) und ebenso für Allergiker geeignet, da sie latexfrei und ungepudert sind. Sie entsprechen den Qualitätsanforderungen an das akzeptierte Qualitätsniveau AQL 1,5. Den Nachweis der Sicherheit und der medizinisch-technischen Leistungsfähigkeit erbringen die Einmalhandschuhe gemäß der europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG. siehe auch S. 56 ff.



JKL

Der große Vorteil gegenüber Latexhandschuhen freut vor allem die Allergiker unter den Anwendern, denn Nitril kann keine Latexallergie auslösen. Auch Vinylhandschuhe sind latexfrei, aufgrund der Materialbasis von Polyvinylchlorid (PVC) unabhängig von natürlichen Rohstoffen und damit unschlagbar günstig. Vinylhandschuhe sind nicht ganz so flexibel und resistent wie Handschuhe aus Nitril und daher besonders als Untersuchungshandschuh oder

für Kurzzeitanwendungen und leichtere Hygieneeinsätze im Pflegebereich geeignet. Seine glatte Struktur und die haptischen Charaktereigenschaften werden besonders bei der Anwendung im Bereich der Nasspflege geschätzt. Beide Handschuhe sind neben ihrer gebrauchsmäßigen Bestimmung im medizinischen bzw. im pflegerischen Sektor auch für Arbeiten in Werkstatt, Handwerk, Hobby, Garten und Haushalt geeignet.

Vlies- und Hygienekittel

aus leichtem, atmungsaktivem Polypropylen-Spinnvlies, mit elastischem Gummizug an den Armen, je nach Modell auch verbreiterte Trikotbündchen oder PE-Beschichtung, einfaches Anlegen, Verschlussbänder an Hals und Taille, großzügig geschnitten für beste Bewegungsfreiheit, flüssigkeitsabweisend, unsteril, unterschiedliche Stärken für individuelle Anwendungen



Vlieskittel Easy, ca. 24 g/m²

Farbe & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
grün, ca. 110 x 140 cm	10000112-grün	10 Stück	10 Pack	40 Karton	10524744
gelb, ca. 110 x 140 cm	10000112-gelb	10 Stück	10 Pack	40 Karton	10524738
blau, ca. 120 x 155 cm	10000112-blau	10 Stück	10 Pack	40 Karton	10524721



Breitere Ärmelabschlüsse, sogenannte Trikotbündchen, an den Kittelärmeln verhindern ungewolltes Hochrutschen der Ärmel während der Anwendung und sorgen so für bequemen Sitz und sicheren Schutz. Sie sind weich und elastisch bei angenehmem Tragekomfort.



Vlieskittel Easy, ca. 24 g/m², Trikotbündchen

Farbe & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
grün, ca. 130 x 155 cm	10000114-grün	10 Stück	10 Pack	40 Karton	10524750
gelb, ca. 125 x 145 cm	10000114-gelb	10 Stück	10 Pack	40 Karton	-

Vlieskittel Easy Trikotbündchen mit zusätzlicher teilweiser PE-Beschichtung an den Armen und auf der Vorderseite (orange) oder kompletter PE-Beschichtung (gelb)



Vlieskittel Easy, ca. 24 g/m², teilweise bzw. komplett PE-beschichtet, Trikotbündchen

Farbe & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
orange, ca. 136 x 136 cm	10001027	10 Stück	10 Pack	40 Karton	-
gelb, ca. 140 x 140 cm	10000010	10 Stück	10 Pack	40 Karton	-

Vlies- und Hygienekittel

unser Standardkittel für den Pflege- und Klinikbereich, die 30 g/m²-Qualität bietet ausreichend Schutz vor Keimverschleppung



Vlieskittel Standard, ca. 30 g/m²

Farbe & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
grün, ca. 120 x 140 cm	10000009	10 Stück	10 Pack	36 Karton	6839465

mit seinen ca. 35 g/m² ist dieser Kittel etwas stärker und strapazierfähiger als die Standardqualität bei gleicher Luftdurchlässigkeit



Vlieskittel Easy strong, ca. 35 g/m²

Farbe & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
blau, ca. 120 x 145 cm	10000737	10 Stück	10 Pack	36 Karton	-

die Materialstärke von ca. 50 g/m² gewährleistet erhöhten Schutz vor Keimen und Flüssigkeiten, blickdicht, glatt und fusselarm



Vlieskittel extra dick, ca. 50 g/m²

Farbe & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
grün, ca. 120 x 145 cm	10000113	10 Stück	10 Pack	12 Karton	-

Auch unsere TIGA-MED® Vlies- und Hygienekittel sind nach Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, als Medizinprodukte der Klasse 1, Regel 1 klassifiziert. Demnach sind sie für eine kurzzeitige Anwendungsdauer anerkannt und bieten eine hohe Sicherheit bei der Einmalverwendung. Sie entsprechen den Normanforderungen nach DIN EN

ISO 22612 und DIN EN 14126 (PE-beschichtete Kittel) für Schutzkleidung gegen infektiöse Agenzien und zur Beständigkeit gegen mikrobielle Penetration. Somit sind Sie mit unseren Einmalkitteln für den Infektionsschutz und die Einhaltung hygienischer Vorschriften bestens gerüstet.

siehe auch S. 56 ff.

Mundschutz

Einmal-Mundschutz, drei hochfrequenzverschweißte Lagen, unsteril, mit elastischen Gummibändern und verstärktem langem Nasenclip lässt sich der Mundschutz optimal justieren und passt sich der Gesichtsform an, hervorragender Infektionsschutz mit einer Bakterienfiltereffizienz (BFE) > 99,5 %, hautfreundliches und angenehmes Tragen auch bei längerer Anwendungsdauer



Mundschutz mit Gummibändern

Farbe & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
grün, ca. 17 x 9,5 cm	10000062-GBgrün	50 Stück	40 Pack	22 Karton	7521334
blau, ca. 17 x 9,5 cm	10000062-GBblau	50 Stück	40 Pack	22 Karton	-

Unser TIGA-MED® Mundschutz, ganz gleich ob mit elastischen Ohrschlaufen oder Bändern zum Binden, ist nach DIN EN 14683 geprüft und entspricht den Anforderungen an medizinische Gesichtsmasken und ist bestens für die kurzzeitige Anwendung geeignet. Außerdem ist er frei von Latex, Nickel und Glasfasern und somit hypoallergen.

Einmal-Mundschutz mit Befestigungsbändern zum Binden, 3-lagig, unsteril, ein verstärkter langer Nasenclip erleichtert das Justieren, hervorragender Infektionsschutz mit einer Bakterienfiltereffizienz (BFE) > 99,5 %, optimaler Atemwiderstand, hautfreundlich



Mundschutz mit Bindebändern

Farbe & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
grün, ca. 18 x 9,5 cm	10000062-BBgrün	50 Stück	40 Pack	18 Karton	7521340

Atemschutzmasken

Faltform, latexfreie Gummibänder, formbare Nasenklammer mit weichem Nasenpolster, für Brillenträger geeignet, mit oder ohne Ventil, Schutz gegen ungiftige feste und flüssige Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes MAK (s. Infokasten)



FFP 2-Maske

Ausführung & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ohne Ventil, oneseize	10000080-2oVent	20 Stück	10 Pack	-	-
mit Ventil, oneseize	10000080-2mVent	20 Stück	10 Pack	-	-

Schutz gegen ungiftige feste und flüssige Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes MAK (s. Infokasten), Grundeigenschaften wie FFP 2



FFP 3-Maske

Ausführung & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
mit Ventil, oneseize	10000080-3mVent	20 Stück	10 Pack	-	-

FFP-Masken (FFP = „face filtering piece“) sind an Arbeitsplätzen vorgeschrieben, an denen die Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK), d. h. die maximal zulässige Konzentration von Stäuben, Rauch und Aerosolen in der Atemluft (außer Dampf und Gase), die nicht zu gesundheitlichen Schäden führt, überschritten wird. **FFP 1**-Masken bieten ausreichend Schutz vor ungiftigen und nicht-fibrogenen Stäuben, deren Einatmung nicht zur Entwicklung von Erkrankungen führt, aber die Atemwege reizen und eine Geruchsbelastung darstellen kann. Die MAK darf maximal um das 4-fache überschritten werden. Masken der Klasse **FFP 2** schützen in Arbeitsumgebungen, deren Luft gesundheitsschädliche und erbgutverändernde Stoffe beinhalten

ten kann, deren Partikel langfristig das Lungengewebe schädigen können. Der MAK-Wert darf nicht mehr als das 10-fache erhöht sein. Schutz vor giftigen und gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen, die krebserregende und radioaktive Schadstoffe und Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilzsporen enthalten können, werden von Masken der Schutzklasse **FFP 3** gefiltert. Die MAK darf höchstens um das 30-Fache überschritten werden. Die Schutzwirkung ist nur bei richtiger Produktauswahl gewährleistet. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Sicherheitsbeauftragten, um die Eignung der Maske für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

siehe auch S. 56 ff.

Schwesternhauben

leichtes, extraweiches Spinnvlies-Material (ca. 14 g/m²) aus Polypropylen, runde Baretiform, luftdurchlässig und temperatenausgleichend, mit Gummibandeinfassung zum einfachen Aufsetzen und komfortablen Tragen, hypoallergen, da latex- und glasfaserfrei, einzeln aus dem Beutel entnehmbar, unsteril



Schwesternhauben

Farbe & Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
grün, ca. Ø 53 cm	10000007-grün	100 Stück	20 Pack	24 Karton	6916527
weiß, ca. Ø 53 cm	10000007-weiß	100 Stück	20 Pack	24 Karton	6916510

PE-Schürzen

leichte und strapazierfähige Einmalschürzen aus Polyethylen, dehnbar und reißfest, absolut wasserabweisend und feuchtigkeitsundurchlässig, milchig-weiß, gehämmert, in der Taille zum Binden für festen Sitz, einzeln gefaltet in der praktischen Dispenserbox für bequemes Entnehmen, Materialstärke ca. 20 µ



PE-Schürzen

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
klein, ca. 75 x 125 cm	10000008-klein	100 Stück	10 Pack	33 Karton	8839110
groß, ca. 75 x 140 cm	10000008-groß	100 Stück	10 Pack	33 Karton	8757553

Baumwollhandschuhe

weiße Zwirnhandschuhe aus medizinisch gebleichter weicher Baumwolle, fest verarbeitete Nähte, hautfreundlich und luftdurchlässig, unsteril, puderfrei, 12 Paar Handschuhe je Pack (1 Pack à 24 Stück), hygienisch verpackt im Polybeutel



Baumwollhandschuhe

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Medium	10001028-M	24 Stück	100 Pack	-	-
Large	10001028-L	24 Stück	100 Pack	-	-

Überschuhe

flüssigkeitsresistentes, wasserdichtes CPE-Material, strapazierfähig, reißfest, mit Gummizug, gehämmert, Standard-, stärkere und extra reißfeste (Vlies mit beschichteter und verstärkter Anti-Rutsch-Sohle) Qualität, antistatisch, passend bis ca. Schuhgröße 45, gerollt zu je 10 bzw. 5 Stück



Überschuhe

Qualität	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
standard, ca. 2,8 g	10000004	100 Stück	20 Pack	35 Karton	8443493
stark, ca. 3,6 g	10000005	100 Stück	20 Pack	35 Karton	9254311
extra stark, ca. 9,2 g	10000006	50 Stück	20 Pack	35 Karton	-

Esslätzchen für Erwachsene

2-lagige Qualität aus feuchtigkeitsundurchlässiger PE-Folie und weichem Tissue, mit ausfaltbarer Auffangtasche, der Halsausschnitt kann mit den vorperforierten integrierten Bändern durch Binden im Nacken angepasst werden, einzeln gefaltet im Beutel



Esslätzchen für Erwachsene

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 66 x 37 cm	10000078	50 Stück	20 Pack	35 Karton	6838804

Esslätzchen für Babys

Einmal-Esslätzchen speziell für Babys und Kleinkinder, mit ausfaltbarer Auffangtasche, Befestigungsstreifen zum Kleben zum individuellen Umbinden, weiches bedrucktes Krepp-Tissue auf der Vorderseite, wasserdichte PE-Laminierung auf der Rückseite



Esslätzchen für Babys

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 30 x 24 cm	10000079	40 Stück	12 Pack	30 Karton	-




MEDIZINISCHE HILFSMITTEL



Der Umgang mit medizinischen Hilfsmitteln gehört sowohl im Pflege- als auch im medizinischen Bereich zwar zur Routine, jedoch sind einwandfreie Qualität und verlässliche Funktionalität essentielle Voraussetzungen für die einfache Verwendung dieser Produkte, nicht nur für die Patienten, sondern auch für das Fachpersonal. Unsere Produktpalette bietet integrale Komponenten für die sichere Infusions-, Transfusions- und Beatmungstherapie oder die Katheterisierung.

Sauerstoffnasenbrillen

weiche Sauerstoffnasenbrille für maximalen Tragekomfort, mit genormtem Standardkon-
 nektor, Schlauch mit Sternlumen (die sternför-
 mige Innenwand sichert den Zufluss auch bei
 geknicktem Schlauch), unsteril, einzeln hygie-
 nisch verpackt

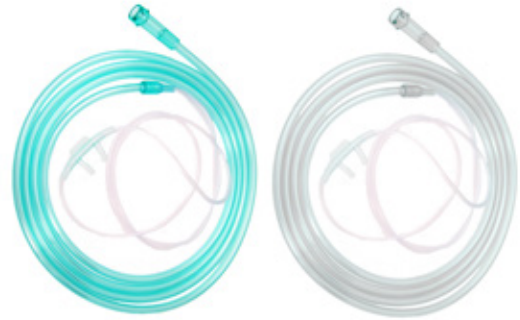

Sauerstoffnasenbrillen

Farbe & Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
grün, ca. 210 cm	10000100-grün210	1 Stück	100 Pack	42 Karton	6830435
grün, ca. 426 cm	10000100-grün426	1 Stück	100 Pack	42 Karton	-
transparent, ca. 210 cm	10000100-trans210	1 Stück	100 Pack	42 Karton	9102363

Sauerstoffmasken

weiche Qualität, Nasenclip für beste Gesichts-
 anpassung und hohen Tragekomfort, Gummi-
 band zur einfachen Befestigung, mit oder ohne
 Reservoirbeutel für optimale Rückatmung,
 knickstabiler Schlauch (Sternlumen), unsteril,
 einzeln hygienisch verpackt



Sauerstoffmasken

Ausführung & Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
standard, ca. 210 cm	10000102	1 Stück	100 Pack	25 Karton	6830470
mit Beutel, ca. 210 cm	10000103	1 Stück	100 Pack	25 Karton	6830487

Sauerstoffverlängerung

Verlängerungsschlauch für Nasenbrillen oder
 Masken, mit genormten und beidseitigen Kon-
 nektoren, Schlauch mit Sternlumen (die stern-
 förmige Innenwand sichert den Zufluss auch
 bei geknicktem Schlauch), unsteril, einzeln hygi-
 enisch verpackt



Alle TIGA-MED® Sauerstoff-
 artikel haben knickstabile
 Schläuche durch sternförmige
 Verstärkungen
 (Sternlumen).



Sauerstoffverlängerung

Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 210 cm	10000101	1 Stück	100 Pack	42 Karton	6830458

Infusionssystem

Rollklemme in DIN-Sicherheitsfarbe, für Druck- und Schwerkraftinfusion geeignet, Partikelfilter, mit verschließbarer Belüftung, transparente Tropfkammer, Luer-Lock-Ansatz, mit oder ohne Rückschlagventil, spitzer Einstechdorn, einzeln steril verpackt, latexfrei



Infusionssystem

Ausführung & Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
standard, ca. 150 cm	10000054-150	1 Stück	100 Pack	48 Karton	-
standard, ca. 190 cm	10000054-190	1 Stück	100 Pack	48 Karton	-
Rückschlagventil, ca. 190 cm	10000054-RV	1 Stück	100 Pack	45 Karton	-

Infusionsregler

Infusionssystem mit Präzisionsregler, 2 Skalen für 10-prozentige bzw. 40-prozentige zu infundierende Lösungen, verschließbare Belüftung, Partikelfilter, Einspritzventil, steril verpackt, latexfrei



Tropfenregler mit zwei Skalen für 10-prozentige und 40-prozentige Lösungen, Belüftung und Partikelfilter, komplett mit Infusionssystem

Infusionsregler

Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 180 cm	10000054-IR	1 Stück	100 Pack	40 Karton	9338396

Transfusionssystem

leicht zu bedienende Rollklemme, für die Schwerkrafttransfusion, ohne Belüftung, 200-µm Blutfilter, spitzer Einstechdorn, einzeln steril verpackt, latexfrei



Transfusionssystem

Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 180 cm	10000032	1 Stück	100 Pack	54 Karton	10123471

Urinbeutel Gold 1

geschlossenes Urindrainagesystem, steril, Fassungsvermögen: ca. 2.000 ml, Schlauchlänge: ca. 110 cm, großlumiger knickstabiler Schlauch, nadelfreie Urinprobenentnahmestelle, Beutelentlüftung, Ventil zur Rückflusssperre, leicht zu bedienender Abflusshahn, genormter trichterförmiger Katheterkonnektor

Hilfsmittelnummer: 15.25.07.0056



Urinbeutel Gold 1

Größe/Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 2 Liter/110 cm	10000096	1 Stück	40 Pack	30 Karton	6839666

Urinbeutel Gold 2

Fassungsvermögen: ca. 2.000 ml, Schlauchlänge: ca. 110 cm, großlumiger knickstabiler Schlauch, mit Katheterkonus für alle gängigen Katheter, Ventil zur Rückflusssperre, nadelfreie Urinprobenentnahmestelle, leicht zu bedienender Abflusshahn

Hilfsmittelnummer: 15.25.06.3033



Urinbeutel Gold 2

Größe/Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 2 Liter/110 cm	10000095	1 Stück	100 Pack	-	6839643

Urinbeutel Gold 3

Fassungsvermögen: ca. 2.000 ml, Schlauchlänge: ca. 90 cm, großlumiger knickstabiler Schlauch, mit Katheterkonus für alle gängigen Katheter, Ventil zur Rückflusssperre, leicht zu bedienender Abflusshahn

Hilfsmittelnummer: 15.25.06.3034



Urinbeutel Gold 3

Größe/Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 2 Liter/90 cm	10000094	1 Stück	100 Pack	-	6839637

Urinmesssystem

Messkammer: ca. 500 ml, steril, Fassungsvermögen: ca. 2.600 ml, knickstabiler Schlauch mit ca. 150 cm Länge, Katheterkonus für alle gängigen Katheter, nadelfreie Urinprobenentnahmestelle, geruchsdichtes Material, Beutelentlüftung, Ventil zur Rückflusssperre, leicht zu bedienender Abflusshahn, stabile Kunststoff-Betthalterung



Urinmesssystem

Größe/Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 2,6 Liter/150 cm	10000097	1 Stück	20 Pack	-	-

Beinbeutel

Urinbeinbeutel für Tag und Nacht, steril, Fassungsvermögen: ca. 1.000 ml, Urinprobenentnahmestelle, Beutelentlüftung, mit hautschonender weicher Vlies-Innenseite, Ventil zur Rückflusssperre

Hilfsmittelnummer: 15.25.05.3093



Beinbeutel

Größe/Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 1 Liter/30 cm	10000092-30	1 Stück	50 Pack	42 Karton	9102280
ca. 1 Liter/60 cm	10000092-60	1 Stück	50 Pack	42 Karton	9102297
ca. 1 Liter/90 cm	10000092-90	1 Stück	50 Pack	42 Karton	9102305

Fixationsband

starkes Kletthalteband, ca. 70 cm lang, individuell kürzbar für optimalen Halt

Hilfsmittelnummer: 15.99.99.0008



Fixationsband

Länge	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 70 cm	10000093	1 Stück	100 Pack	-	6718968

Silikon-Ballonkatheter

100 % Silikon, 2-Wege (Foley), geschlossene Spitze (Nelaton), einzeln steril verpackt, latexfrei, ca. 40 cm lang, Ballonvolumen ca. 5–10 ml
Hilfsmittelnummer (Ch 12–22): 15.25.15.6057



Silikon-Ballonkatheter

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Ch 12 (ca. 4,0 mm)	10000056-12	1 Stück	10 Pack	-	6830398
Ch 14 (ca. 4,7 mm)	10000056-14	1 Stück	10 Pack	-	6830412
Ch 16 (ca. 5,3 mm)	10000056-16	1 Stück	10 Pack	-	6830464
Ch 18 (ca. 6,0 mm)	10000056-18	1 Stück	10 Pack	-	6830493
Ch 20 (ca. 6,7 mm)	10000056-20	1 Stück	10 Pack	-	6830501
Ch 22 (ca. 7,3 mm)	10000056-22	1 Stück	10 Pack	-	6830518

NELATON, FOLEY & CHARRIÈRE

Die Unterscheidung von Kathetern erfolgt häufig nach ihren Spitzen: Mit am gebräuchlichsten ist der Nelaton-Katheter. Er hat eine geschlossene, abgerundete Spitze, zwei seitliche Einflussöffnungen knapp unterhalb der Spitze und einen trichterförmigen Auslauf. Ein Katheter nach Foley ist ein Katheter mit Nelaton-Spitze, mit einem zusätzlichen Ballon zur Fixierung des Katheters in der Blase.



Als 2-Wege-Katheter besitzt er demnach einen dicken Kanal für die Urindrainage und einen dünnen Kanal für die Ballonblockierung.



Ballonblockierung
Urindrainage

Durch den inneren, größeren Lauf fließt der Harn ab, der äußere, kleinere Lauf endet in einem Ventil mit verschließbarem Schenkel. Nach Platzierung durch die Harnröhre (transurethral) in der Harnblase wird durch Einspritzen von destilliertem Wasser in diesen Lauf der Katheter durch einen an der Katheterwand angebrachten, befüllbaren Ballon unterhalb der Katheterspitze vor dem Herausgleiten gesichert. Zum Entfernen wird auf diesem Weg mit einer Spritze wieder Wasser aus dem Ballon abgesaugt, der Ballon fällt zusammen

ungeblockter Katheter

geblockter Katheter

und der „entblockte“ Katheter kann wieder entnommen werden.

Die Auswahl des Materials bestimmt im Wesentlichen die Liegedauer des Katheters. Katheter aus reinem Silikon sind verträglicher, haben einen höheren Innendurchmesser (Lumen) und sind für längere Liegezeiten bis 4 Wochen ideal. Latexkatheter sollten nur zur kurzzeitigen Katheterisierung (bis zu einer Woche) verwendet werden.

Latex-Ballonkatheter

silikonisiert, 2-Wege (Foley), geschlossene Spitze (Nelaton), steril verpackt, 40 cm lang, Ballonvolumen ca. 5–10 ml



Latex-Ballonkatheter

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Ch 12 (ca. 4,0 mm)	10000055-12	1 Stück	10 Pack	-	6829998
Ch 14 (ca. 4,7 mm)	10000055-14	1 Stück	10 Pack	-	6830004
Ch 16 (ca. 5,3 mm)	10000055-16	1 Stück	10 Pack	-	6830033
Ch 18 (ca. 6,0 mm)	10000055-18	1 Stück	10 Pack	-	6830139
Ch 20 (ca. 6,7 mm)	10000055-20	1 Stück	10 Pack	-	6830174
Ch 22 (ca. 7,3 mm)	10000055-22	1 Stück	10 Pack	-	6830197

Die Kathetergrößen werden durch den jeweiligen Außendurchmesser klassifiziert.

Ein Charrière (Ch) entspricht einem Drittel Millimeter.

Kathetergröße



Millimeter (mm)

4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3

Charrière (Ch)

12 14 16 18 20 22

Blockerspritze

Wasser-Glycerin-Gemisch (10 ml), zum Blocken des Katheters, steril verpackt



Blockerspritze

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 10 ml	10000028	1 Stück	10 Pack	-	-

Wund- und Blasenpritze

steril, Luer-Adapter, gerader Katheteransatz, gut lesbare Skala, atraumatisch abgerundet, aus PP



Wund- und Blasenpritze

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
50/60 ml	10000082-50	1 Stück	50 Pack	-	6839494
100/120 ml	10000082-100	1 Stück	50 Pack	44 Karton	6839502

Katheterset Gold 1

- Inhalt:**
- 1 x Papp-Nierenschale
 - 1 x Tupferschale
 - 5 x Mulltupfer, pflaumengroß
 - 2 x Mullkompressen (7,5 x 7,5 cm)
 - 1 x Pinzette
 - 1 Schlitz-/Lochtuch (60 x 60 cm)
 - 2 x Nitrilhandschuhe, puderfrei, M
 - 1 x Einschlagtuch (60 x 60 cm)
 - 1 x Steriltüte mit Etikett
- auch mit Blockerspritze (10 ml) erhältlich



Katheterset Gold 1

Inhalt	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
s.o. (ohne Blockerspritze)	10000107	1 Stück	40 Pack	24 Karton	6830381
s.o. (mit Blockerspritze)	10000107-BI	1 Stück	40 Pack	24 Karton	-

Katheterset Gold 2

- Inhalt:**
- 1 x Urinauffangschale
 - 4 x Mulltupfer, pflaumengroß
 - 2 x Mullkompressen (7,5 x 7,5 cm)
 - 2 x Pinzetten
 - 1 Schlitz-/Lochtuch (60 x 60 cm)
 - 2 x Nitrilhandschuhe, puderfrei, M
 - 1 x Einschlagtuch (60 x 60 cm)
 - 1 x Steriltüte mit Etikett
- auch mit Blockerspritze (10 ml) erhältlich



Katheterset Gold 2

Inhalt	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
s.o. (ohne Blockerspritze)	10000108	1 Stück	40 Pack	24 Karton	7584168
s.o. (mit Blockerspritze)	10000108-BI	1 Stück	40 Pack	24 Karton	-

Katheterset Gold 5

- Inhalt:**
- 1 x Papp-Nierenschale
 - 1 x Tupferschale
 - 5 x Mulltupfer, pflaumengroß
 - 2 x Mullkompressen (7,5 x 7,5 cm)
 - 2 x Pinzetten
 - 1 Schlitz-/Lochtuch (50 x 50 cm)
 - 2 x Nitrilhandschuhe, puderfrei, M
 - 1 x Einschlagtuch (60 x 60 cm)
 - 1 x Steriltüte mit Etikett
- auch mit Blockerspritze (10 ml) erhältlich



Katheterset Gold 5

Inhalt	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
s.o. (ohne Blockerspritze)	10000109	1 Stück	40 Pack	24 Karton	6830406
s.o. (mit Blockerspritze)	10000946	1 Stück	40 Pack	24 Karton	-

Katheter-Komplettset

Inhalt:	1 x Einmalspritze (10 ml), leer
1 x Urinauffangschale	1 x Einschlagtuch (60 x 60 cm)
6 x Mulltupfer	1 x Steriltüte mit Etikett
4 x Mullkompressen (7,5 x 7,5 cm)	1 x Pinzette
1 x Schlitz-/Lochtuch (60 x 60 cm)	
2 x Nitrilhandschuhe, puderfrei, large	beigepackt sind:
1 x Blockerspritze (10 ml, mit sterilem Wasser-Glycerin-Gemisch)	1 x Octenilin (30 ml)
	1 x Gleitmittel Kathydor



Katheter-Komplettset

Inhalt	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
s.o.	10000111	1 Stück	50 Pack	-	-

Stationsset

Inhalt:
1 x Papp-Nierenschale
10 x Mullkompressen (10 x 10 cm)
10 x Mullkompressen (5 x 5 cm)
1 x Pinzette
1 x Einschlagtuch (60 x 60 cm)
1 x Steriltüte mit Etikett



Alle TIGA-MED® Kathetersets bestehen aus steril verpackten Komponenten, die sofort griffbereit sind. Mit der Steriltüte, in der die Hilfsmittel verpackt sind, kann alles nach der Anwendung hygienisch und praktisch entsorgt werden.

Stationsset

Inhalt	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
s.o.	10000110	1 Stück	40 Pack	-	9102311

Wir beraten Sie gern

Je nach Anforderung bieten wir unsere Einmal-Kathetersets zum Legen oder Wechseln von transurethralen Kathetern oder zur einmaligen Katheterisierung im Rahmen einer diagnostischen Maßnahme mit unterschiedlichem Inhalt an. Somit erhalten Sie von uns verschiedene Set-Varianten für individuelles, systematisches, steriles und bedarfsorientiertes Arbeiten. Bitte beachten Sie, dass in

unseren Kathetersets keine Katheter enthalten sind. Diese sind separat erhältlich. Sollten Sie zu Verwendung, Inhalt und Komponenten weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen für deren Beantwortung zu unseren Bürozeiten montags bis donnerstags zwischen 8 und 15:30 Uhr sowie freitags von 8 bis 14:30 Uhr gern telefonisch unter 036602 509645 oder per Email unter info@tiga-med.de zur Verfügung.

Einmalspritzen

2-teilig, ohne Kanüle, einzeln steril verpackt, transparenter Zylinder, schwarze Graduierung (ml) für optimale Ablesbarkeit, über das Nennvolumen verlängerte Skala, Kolbenstopp, Luer-Ansatz (50 ml: Luer-Lock), latex-, pyrogen- und phthalatfrei




Einmalspritzen

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
2 ml	10000053-2ml	100 Stück	28 Pack	-	9328707
5 ml	10000053-5ml	100 Stück	19 Pack	-	9328713
10 ml	10000053-10ml	100 Stück	12 Pack	-	9328736
20 ml	10000053-20ml	80 Stück	12 Pack	-	9328742
50 ml	10000053-50ml	25 Stück	16 Pack	-	-

Kombistopfen

zum Verschließen aller Luer-Slip/Luer-Lock-Ansätze, druckbeständig bis 2 bar, einzeln steril verpackt

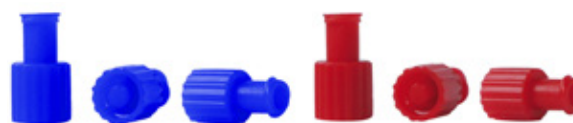

Kombistopfen

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
rot	10000050-rot	100 Stück	20 Pack	-	-
blau	10000050-blau	100 Stück	20 Pack	-	-

Abwurfbehälter

gelber Behälter mit rotem Sicherheitsdeckel, kleiner gelber Zusatzdeckel, aus stabilem und sicherem PP-Material



Abwurfbehälter

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 1 Liter	10000059-klein	1 Stück	50 Pack	36 Karton	6838974
ca. 2 Liter	10000059-groß	1 Stück	50 Pack	20 Karton	6839011

Insulinspritzen

Einmalspritzen (1 ml) mit Kanüle (29 G x ½" = 0,33 x 12,7 mm), 3-teilig, U 100, einzeln steril verpackt, 1 Teilstrich = 2 IE, minimales Restvolumen, latexfrei



Insulinspritzen

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
29 G x ½ (0,33 x 12,7 mm)/1 ml	10000031	100 Stück	32 Pack	-	-

Tuberkulinspritzen

Einmalspritzen (1 ml) mit Kanüle (29 G x ½" = 0,33 x 12,7 mm), 3-teilig, steril verpackt, minimales Restvolumen, latexfrei



Tuberkulinspritzen

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
29 G x ½ (0,33 x 12,7 mm)/1 ml	10000030	100 Stück	32 Pack	-	-

Venenstauer

Einhandbedienung möglich, 2-Stufen-Sicherheitsverschluss, hautverträglich, waschbar bei 60 °C, ca. 45 cm lang



Venenstauer

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
grün	10000064-grün	1 Stück	50 Pack	-	6839413
rot	10000064-rot	1 Stück	50 Pack	-	6839442
blau	10000064-blau	1 Stück	50 Pack	-	6839456
orange	10000064-orange	1 Stück	50 Pack	-	-

PFLEGE UND ALLTAG

Im pflegerischen Alltag gilt es vor allem, das Wohlbefinden der Patienten sicherzustellen und deren Würde zu bewahren. Gleichzeitig soll das Pflegepersonal bei den anfallenden Handgriffen und Tätigkeiten möglichst effizient unterstützt und bestmöglich entlastet werden. Wir bieten neben den klassischen Produkten zur Körperpflege und Patientenhigiene vor allem auch praktische und clevere Alltagshelfer an, die das Leben besonders im Alter erleichtern.





Waschhandschuhe

angenehm weiche weiße Molton-Qualität (ca. 80 g/m²) oder blau/weißes Vliesmaterial (ca. 45 g/m²), reißfest, hohe Saugkraft, hautfreundlich, rubbelfest, beugt Kreuzinfektionen vor, da es sich um ein hygienisches Einmalprodukt handelt, formbeständig



Waschhandschuhe

Ausführung/Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ultra soft weiß/ca. 15 x 23 cm	10000074	50 Stück	20 Pack	50 Karton	6838773
Vlies blau-weiß/ca. 15 x 23 cm	10000075	100 Stück	20 Pack	36 Karton	7385434

feuchte Waschhandschuhe

mit Aloe Vera und Kamillenextrakt vorimprägnierte Waschhandschuhe, ideal für die Pflege bettlägeriger Patienten, wiederverschließbare Packung



feuchte Waschhandschuhe

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 22,5 x 15 cm	10000076	8 Stück	24 Pack	-	-

Mehrzweck-/Wischtücher

dicht genadelter Vliesstoff (ca. 38 g/m²), blau/weiß, saugstark und reißfest, fusselfrei



Mehrzweck-/Wischtücher

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 33 x 15 cm	10000021	50 Stück	20 Pack	-	7385411

Falhtandtücher

Zellstoff, ca. 36 g/m², 2-lagig, V-Falzung



Falhtandtücher

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 25 x 23 cm	10000020	160 Stück	20 Pack	28 Karton	-

Krankenunterlagen standard

saugfähige Zellstofflagen und wasserdichte hellblaue PE-Folie, rundum geschlossen, hautsympathisch und rutschhemmend



Krankenunterlagen standard

Größe/Stärke	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 40 x 60 cm/6-lagig	10000057-S/6	25 Stück	4 Pack	-	10787082
ca. 40 x 60 cm/8-lagig	10000057-S/8	25 Stück	4 Pack	-	10787099
ca. 40 x 60 cm/12-lagig	10000057-S/12	25 Stück	4 Pack	-	10787107
ca. 60 x 60 cm/6-lagig	10000057-M/6	25 Stück	4 Pack	-	10787136
ca. 60 x 60 cm/12-lagig	10000057-M/12	25 Stück	4 Pack	-	10788058
ca. 60 x 90 cm/6-lagig	10000057-L/6	25 Stück	4 Pack	-	10787030
ca. 60 x 90 cm/8-lagig	10000057-L/8	25 Stück	4 Pack	-	10787047
ca. 60 x 90 cm/12-lagig	10000057-L/12	25 Stück	4 Pack	-	10787053

Krankenunterlagen premium

eine Mischung aus Zellstoff-Flocken und SAP Superabsorber sorgt für ein Vielfaches an Saugvermögen gegenüber normalen Zellstofflagen, weißes Tissuematerial, hellblaue Folie, rundherum geschlossen, hautsympathisch und rutschhemmend



Krankenunterlagen premium

Größe/Stärke	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 40 x 60 cm/6-lagig	10001041-S/6	25 Stück	4 Pack	-	-
ca. 60 x 60 cm/6-lagig	10001041-M/6	25 Stück	4 Pack	-	-
ca. 60 x 90 cm/6-lagig	10001041-L/6	25 Stück	4 Pack	-	-

Tragelaken

2-lagig (Tissue und PE), hohe Reißfestigkeit und Stabilität durch Nylonfadenverstärkung (8- oder 48-fach), wasserundurchlässig, einzeln gefaltet



Tragelaken

Größe/Stärke	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 80 x 210 cm/8-fach	10000105-80/8	25 Stück	4 Pack	50 Karton	-
ca. 100 x 200 cm/8-fach	10000105-100/8	25 Stück	4 Pack	40 Karton	-
ca. 80 x 210 cm/48-fach	10000105-80/48	25 Stück	4 Pack	47 Karton	-

Ärztrollen

weißes Tissue-Material, 2-lagig, weich und saugfähig, alle 38 cm vorperforiert (Abreißkante), 50 m je Rolle, Rollen einzeln hygienisch in Folie verpackt



Ärztrollen

Breite	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 39 cm	10000044-39	1 Stück	9 Pack	24 Karton	9102328
ca. 50 cm	10000044-50	1 Stück	9 Pack	18 Karton	9102334
ca. 59 cm	10000044-59	1 Stück	9 Pack	18 Karton	9102357

Einmaldecken

Hülle aus weichem, körperfreundlichem PP-Vlies, Füllung aus Baumwollwatte mit Polyesteranteil, Füllung spendet ca. 30 % mehr Wärme als gewöhnliche Papierdecken, atmungsaktiv, ultraschall-geschweißt, sauber und stabil verarbeitet, einzeln im Polybeutel verpackt, Füllung Baumwollwatte mit Polyesteranteil: ca. 200 g (Sommer) bzw. ca. 400 g (Winter)



Einmaldecken

Ausführung/Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Sommer/ca. 110 x 190 cm	10001039	1 Stück	40 Pack	-	-
Winter/ca. 110 x 190 cm	10001040	1 Stück	30 Pack	-	-

Matratzenschonbezüge

reißfestes PE-Material (ca. 20 µ), mit Gummizug zum einfachen Beziehen der Matratze, wasserdicht, gehämmert, antistatisch, Einmalprodukt



Matratzenschonbezüge

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 90 x 210 cm	10000025	10 Stück	10 Pack	-	6916444

Urinflaschen

für Männer: robustes PP-Material, milchig, Fassungsvermögen ca. 1 Liter, mit Graduierung, autoklavierbar bis 130 °C, mit blauem Deckel

für Frauen: robustes PE-Material, milchig, Fassungsvermögen ca. 800 ml, mit Graduierung



Urinflaschen

Ausführung/Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Männer/ca. 1 Liter	10000049-M	1 Stück	25 Pack	-	8443524
Frauen/ca. 800 ml	10000049-F	1 Stück	54 Pack	-	-

Urinflaschenhalter

Bethalterung passend für Urinflaschen für Männer, mit Deckel und Kette, kunststoffbeschichtetes Metallgestell, einzeln verpackt im PE-Beutel



Urinflaschenhalter

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Einheitsgröße	10000034	1 Stück	20 Pack	-	8443582

Urinflaschenbürste

Reinigungsbürste für Urinflaschen, stabile Borsten, handlicher Griff



Urinflaschenbürste

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 37 x 5 cm	10000033	1 Stück	250 Pack	-	-

Urinprobenbecher

125 ml, grüner Schraubdeckel, in 20-ml-Schritten bis 100 ml graduert, robustes PP-Material, beschriftbar, Größe: ca. 6 (Ø) x 7,2 cm



Urinprobenbecher

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 6 (Ø) x 7,2 cm	10000035	1 Stück	500 Pack	-	-

Papp-Nierenschale

besonders stabile Ausführung, flüssigkeitsdicht, zu 100 % kompostierbar, Pappe aus Recycling-Qualität



Papp-Nierenschale

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 24,5 x 14 x 4,5 cm	10000013	1 Stück	300 Pack	28 Karton	-

Auffangbeutel/Spuckbeutel

zur Verwendung bei Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit, bestehend aus Spuckbeutel mit Kunststoff-Ring zum Verschließen



Auffangbeutel

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 37 x (Ø) 12 cm	10001031	50 Stück	9 Pack	-	-
ca. 37 x (Ø) 12 cm	10001081	25 Stück	18 Pack	-	-

Mundspatel

aus Holz, abgerundete Enden, glatte Oberfläche, unsteril im Polybeutel




Mundspatel

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 15 x 1,8 cm	10000018	100 Stück	50 Pack	-	-

Mundpflegestäbchen

schonende und atemfrische Mundhygiene, Partikelbeseitigung durch angerauten Schaumstoff, zuckerfrei (für Diabetiker geeignet), Plastikstäbchen, einzeln hygienisch verpackt

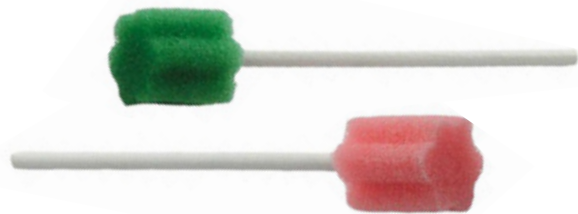

Mundpflegestäbchen

Geschmack	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Neutral	10000058-N	250 Stück	4 Pack	-	-
Minze	10000058-M	250 Stück	4 Pack	-	-
Johannisbeere	10000058-J	250 Stück	4 Pack	-	-
Zitrone	10000058-Z	250 Stück	4 Pack	-	-

Zahnbürsten

flexibles Borstenmaterial, mit Zahnpasta imprägniert, gebrauchsfertig, einzeln hygienisch verpackt, blau, Bürstenkopf ca. 3 cm



Zahnbürsten

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 15 cm	10000014	100 Stück	10 Pack	35 Karton	6838945

Wattestäbchen

mit einseitig großem Kopf, stabiler Stab aus PE-Material, unsteril im Beutel



Wattestäbchen

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 15 cm	10000015	50 Stück	20 Pack	-	6916533

Sofort-Kältekompressen

einfache Aktivierung, ohne Vorkühlung überall und jederzeit einsatzbereit, Kälte hält ca. 20 Minuten an



Sofort-Kältekompressen

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 15 x 17 cm	10000040	1 Stück	50 Pack	15 Karton	6838879

Kalt-Warm-Kompressen

für Kälte- und Wärmeanwendung, mikrowellengeeignet, blaues, atoxisches Thermogel, weicher, stabiler Beutel, für vielfache Anwendung, vollmodellierbar bis -12 °C, desinfizierbar




Kalt-Warm-Kompressen

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 13 x 14 cm	10000039-13x14	1 Stück	50 Pack	-	6455285
ca. 12 x 29 cm	10000039-12x29	1 Stück	25 Pack	-	6455291
Vlieschutzhülle 12 x 29 cm	10000037	100 Stück	20 Pack	-	-

Pinzetten

anatomische Pinzetten aus Polystyrol-Kunststoff, geriffelte Griffe, gezahnte Greifflächen, blau, trapezförmige Spitze, einzeln steril verpackt

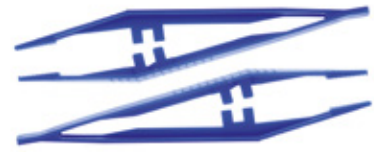

Pinzetten

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 12,5 cm	10000027	100 Stück	4 Pack	-	6916504

Pillenteiler

halbiert oder viertelt Tabletten ohne sie zu zerbröseln, blau, stabiler Kunststoff, sehr scharfe Klinge



Pillenteiler

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 8,5 x 3,5 x 2,5 cm	10000017	1 Stück	24 Pack	-	-

Pillenmörser

Pillenmörser, Pillenteiler und Tablettenfach in einem, robuster Kunststoff, sehr scharfe Klinge



Pillenmörser

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 3,2 x 6,2 cm	10000016	1 Stück	20 Pack	-	-

Medizinbecher und -deckel

Einnehmebecher ohne Deckel, 30 ml, graduiert, stabiler Kunststoff, Deckel sind separat erhältlich



Medizinbecher und -deckel

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
transparent	10000029-trans	80 Stück	60 Pack	50 Karton	-
blau	10000029-blau	80 Stück	60 Pack	50 Karton	-
rot	10000029-rot	80 Stück	60 Pack	50 Karton	-
grün	10000029-grün	80 Stück	60 Pack	50 Karton	-
gelb	10000029-gelb	80 Stück	60 Pack	50 Karton	-
Deckel weiß	10000029-D	500 Stück	8 Pack	-	-

Medikamenten-Dispenser

Tagesdispenser

transparenter Schiebedeckel, verhindert ungewolltes Herausfallen der Medikamente, Ein-

teilung: Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Größe
Einzelfächer (L x B x H): ca. 4,4 x 2,7 x 1,4 cm,
Gesamtgröße: ca. 22 x 6 x 1,5 cm



Wochendispenser Premium

7 Schiebefächer für die Wochentage, jeweils 4-fache Tageseinteilung (Morgen, Mittag, Abend, Nacht), Schiebedeckel verhindern das Herausfallen der Medikamente, Dispenser-Funktion: wird das aktuelle Tagesfach unten

herausgezogen, rutschen die Fächer der Folgetage automatisch nach unten, stabiler Kunststoff, Größe der Tagesfächer (L x B x H): ca. 10,7 x 3,4 x 1,2 cm, Größe der Einzelfächer: ca. 3 x 2,5 x 1,4 cm, Gesamtgröße: ca. 15 x 4 x 13 cm



Wochendispenser Morgens/Abends

2 extra große Tageseinteilungen für morgens (orange) und abends (blau), 7-fache Wocheneinteilung, Fächer der Einzeltage sind abnehmbar,

praktische Klappdeckel halten die Medikamente in den Fächern, Kunststoff, Größe der Einzelfächer (L x B x H): 3,3 x 2,4 x 2,6 cm, Gesamtgröße: ca. 19 x 9 x 3,3 cm



Wochendispenser transparent

7-fache Wocheneinteilung, jeweils 4-fache Tageseinteilung (Symbole für Morgen, Mittag, Abend, Nacht), einzelne Tagesfächer können separat herausgenommen werden, sichere

Aufbewahrung der Medikamente durch Klappdeckel, transparent, Kunststoff, Größe der Tagesfächer (L x B x H): ca. 9,7 x 2,2 x 1,6 cm, Größe der Einzelfächer: ca. 2,4 x 2 x 1,5 cm), Gesamtgröße: ca. 17 x 11 x 2 cm



Medikamenten-Dispenser

Ausführung	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Tagesdispenser	10000061-TD	1 Stück	200 Pack	48 Karton	6838796
Premium blau	10000061-Pblau	1 Stück	40 Pack	-	6916450
Premium grün	10000061-Pgrün	1 Stück	40 Pack	-	8757613
Premium orange	10000061-Porange	1 Stück	40 Pack	-	8757582
Premium rot	10000061-Prot	1 Stück	40 Pack	-	9338350
Premium bunt	10000061-Pbunt	1 Stück	40 Pack	-	-
Morgens/Abends	10000061-MA	1 Stück	100 Pack	-	9254334
Transparent	10000061-Eco	1 Stück	60 Pack	-	9254357

Schnabelbecher und -deckel

Trinkbecher ohne Deckel, 250 ml, graduiert bis 200 ml, spülmaschinengeeigneter Kunststoff, passende Deckel mit kleiner oder großer Trinköffnung (4 bzw. 12 mm) sind separat erhältlich



Schnabelbecher und -deckel

Ausführung/Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Becher transparent	10000047-trans	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839146
Becher blau	10000047-blau	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839152
Becher rot	10000047-rot	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839169
Becher gelb	10000047-gelb	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839175
Deckel klein, transparent	10000407-trans	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839181
Deckel klein, blau	10000407-blau	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839206
Deckel klein, rot	10000407-rot	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839229
Deckel klein, gelb	10000407-gelb	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839241
Deckel groß, transparent	10000408-trans	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839198
Deckel groß, blau	10000408-blau	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839212
Deckel groß, rot	10000408-rot	1 Stück	250 Pack	50 Karton	6839235
Deckel groß, gelb	10000408-gelb	1 Stück	250 Pack	50 Karton	7723196

Nackenkissen

extra flauschig und anschmiegsam, mit Druckknopf zum Schließen am Hals, optimale Nackenstütze für Arbeit, Freizeit und Reisen, mit Polystyrol-Mikroperlen, Bezug aus Polyamid/Elasthan, Handwäsche möglich, Maße: ca. 31 x 32 cm



Nackenkissen

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
schwarz	10000046-schwarz	1 Stück	12 Pack	-	11228574
blau	10000046-blau	1 Stück	12 Pack	-	11228580
rot	10000046-rot	1 Stück	12 Pack	-	11228597
hellblau	10000046-hblau	1 Stück	12 Pack	-	11228605
rot/weiße Punkte	10000046-rot/weiß	1 Stück	12 Pack	-	11228628
weiß/schwarze Punkte	10000046-weiß/schwarz	1 Stück	12 Pack	-	11228611

Sitzkeilkissen

druckentlastender Schaumstoff, strapazierfähig, formstabil, mittelhart, unterstützt körpergerechtes Sitzen im Büro, zu Hause oder im Auto, waschbarer Bezug aus Baumwoll-Mischgewebe mit Reißverschluss, Größe: ca. 37 x 37 cm, Keilhöhe: ca. 7 bis 1 cm



Sitzkeilkissen

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
schwarz	10000045-schwarz	1 Stück	10 Pack	-	10540849
blau	10000045-blau	1 Stück	10 Pack	-	10540826
rot	10000045-rot	1 Stück	10 Pack	-	10540832
violett	10000045-violett	1 Stück	10 Pack	-	10540861
anthrazit	10000045-anthrazit	1 Stück	10 Pack	-	10855205

Einmal-Rasierer

mit Klingenschutz, rostfrei, nickelfrei, unsteril, zur OP-Vorbereitung, 1-schneidig (blau) oder 2-schneidig (grün), mit Sicherheitszacken unterhalb des Klingenkopfes, zur Nassanwendung, einzeln entnehmbar aus praktischer Spenderbox, Klingebreite: ca. 3,5 cm



Einmal-Rasierer

Ausführung/Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
einschneidig/blau	10000430-blau	100 Stück	10 Pack	48 Karton	6830429
zweischneidig/grün	10000430-grün	100 Stück	10 Pack	48 Karton	9254328

Rettungsdecken

aluminiumbedampfte Folie, reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme, verhindert Überhitzung und Unterkühlung (Kälteschutz = Silberseite zum Körper, Hitzeschutz = Goldseite zum Körper)



Rettungsdecken

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 210 x 160 cm	10000026	1 Stück	200 Pack	30 Karton	-

Kopfwaschbecken

zweireihig, langlebiges Vinyl, aufblasbar, Wasser kann am Boden mit dem Abflussschlauch (Länge ca. 118 cm) abgelassen werden, ideale Arbeitshilfe für das Waschen der Haare bettlägeriger Patienten auch im Bett



Kopfwaschbecken

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 66 x 60 x 15 cm	10000023	1 Stück	30 Pack	-	-

Duschhocker

8-fach höhenverstellbare Teleskopbeine (von ca. 34 bis 52 cm Sitzflächenhöhe), Anti-Rutsch-Sitzfläche, mit rutschfesten Gummifüßen, zugelassen bis ca. 110 kg, durch die geraden Beine sehr platzsparend und auch in kleinen Bereichen verwendbar, stabile Ausführung, einfache Montage, Gewicht: ca. 1,8 kg



Duschhocker

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 34-52 cm	10000022	1 Stück	5 Pack	-	-

Duschhaltegriff

2 extra starke Saugnäpfe, Arretierklappen für einfache Befestigung, die optimale Gleichgewichtshilfe, kein großer Montageaufwand (kein Kleben, Bohren oder Dübeln), schnell repositionierbar, hält auf nahezu allen glatten Oberflächen, wie Fliesen, Kacheln, Glas



Duschhaltegriff

Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
ca. 9 x 29 cm	10000024	1 Stück	60 Pack	-	-

Gehstöcke

Halteschlaufe, hochwertig eloxiertes Aluminium, höhenverstellbar von ca. 83-92 cm, 4-fach zusammenklappbar/faltbar (außer 4-Fuß), bis ca. 100 kg belastbar, angenehm leicht und damit praktisch auch für unterwegs, ergonomisch geformter Handgriff („Fritzgriff“), rutschsicherer Gummifuß, in Aufbewahrungstasche aus Kunststoff, verschiedene Farben und Ausführungen



Gehstöcke

Ausführung/Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
standard schwarz	10000060-schwarz	1 Stück	50 Pack	-	-
standard blau	10000060-blau	1 Stück	50 Pack	-	-
standard rot	10000060-rot	1 Stück	50 Pack	-	-
standard silber	10000060-silber	1 Stück	50 Pack	-	-
standard braun	10000060-braun	1 Stück	50 Pack	-	-
standard oriental	10000060-oriental	1 Stück	50 Pack	-	-
Holzgriff schwarz	10000060-Hschwarz	1 Stück	50 Pack	-	-
Holzgriff oriental	10000060-Horiental	1 Stück	50 Pack	-	-
4-Fuß schwarz	10000060-4Fuß	1 Stück	20 Pack	-	-

Schlüsselhalter

Schlüsselhalter mit Karabinerbefestigung und Gürtel-Clip, Schlüsselring und verstärkter Jojoschnur, die auf ca. 75 cm Länge herausgezogen werden kann, der Schlüssel ist so immer zur Hand und einsatzbereit



Schlüsselhalter

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
schwarz	10001045-schwarz	1 Stück	500 Pack	-	-
violett	10001045-violett	1 Stück	500 Pack	-	-
pink	10001045-pink	1 Stück	500 Pack	-	-
orange	10001045-orange	1 Stück	500 Pack	-	-



DIAGNOSTIK UND GERÄTE



Unsere Produktpalette deckt nicht nur den Bedarf an manuellen und digitalen Präzisionsgeräten für die alltäglichen Routineuntersuchungen ab, sondern bietet ebenso verlässliche Hilfsmittel für die Diagnostik und den täglichen Gebrauch. Die große Auswahl an Blutdruckmessgeräten, Stethoskopen, Fieberthermometern und Pulsoximetern wird ergänzt durch Verbrauchsmaterialien wie Elektroden und die entsprechenden Gele sowie durch ein buntes Sortiment an Schwesternuhren komplettiert.

Stethoskope

Flachkopf-Stethoskop

empfindliche Einzelmembran, Y-Schlauch (ca. 55 cm lang), Metallbügel mit Feder, Bruststück aus eloxiertem Aluminium, wechselbare Ohrhölzer, besonders geeignet zur schnellen und sicheren Feststellung des Blutdrucks, in verschiedenen Farben erhältlich



Doppelkopf-Stethoskop

umschaltbare Membran- & Trichterseite, gewährleistet eine sehr gute Geräuschaufnahme, Metallbügel mit Feder, Y-Schlauch (ca. 55 cm lang), Bruststück aus eloxiertem Aluminium, wechselbare Ohrhölzer, verschiedene Farben erhältlich



Rappaport-Stethoskop

mit schwenkbarem und schwerem Doppelmembrankopf, verbesserte Schallweiterleitung durch Doppelschlauch (ca. 55 cm lang), Membrandurchmesser: ca. 45 und 30 mm, Metallbügel mit Feder, zusammen mit umfangreichem Ersatzteil-Sortiment (z. B. auswechselbare Membranen und Ohrhölzer) im Plastik-Etui, in verschiedenen Farben erhältlich



Stethoskope

Ausführung/Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Flachkopf/rot	10000063-Frot	1 Stück	50 Pack	-	6839347
Flachkopf/grün	10000063-Fgrün	1 Stück	50 Pack	-	6839353
Flachkopf/schwarz	10000063-Fschwarz	1 Stück	50 Pack	-	6839376
Flachkopf/blau	10000063-Fblau	1 Stück	50 Pack	-	-
Doppelkopf/schwarz	10000063-Dschwarz	1 Stück	50 Pack	-	7723090
Doppelkopf/rot	10000063-Drot	1 Stück	50 Pack	-	8839156
Doppelkopf/blau	10000063-Dblau	1 Stück	50 Pack	-	9328653
Doppelkopf/violett	10000063-Dviolett	1 Stück	50 Pack	-	-
Rappaport/violett	10000063-Rviolett	1 Stück	50 Pack	-	8757636
Rappaport/blau	10000063-Rblau	1 Stück	50 Pack	-	9328676
Rappaport/grün	10000063-Rgrün	1 Stück	50 Pack	-	-
Rappaport/schwarz	10000063-Rschwarz	1 Stück	50 Pack	-	-

Blutdruckmessgeräte

Einschlauchgerät Gold 1

altweißes Manometer, Skalendurchmesser: ca. 52 mm, Skalierung bis 300 mmHg, sicheres und robustes Kunststoffgehäuse, Nylon-Klettmanchette (ca. 51 x 14 cm) mit Bügel für Armumfänge von ca. 22 bis 32 cm, mit Garantie



Zweischlauchgerät Gold 2

altweißes Manometer, Skalendurchmesser: ca. 52 mm, Skalierung bis 300 mmHg, sicheres und robustes Kunststoffgehäuse, Vorteil zweier Schläuche: erleichtertes Aufpumpen und weniger Reibungsverlust für bessere Oszillationsübertragung (Nadelschwingung), Nylon-Klettmanschette (ca. 51 x 14 cm) für Armumfänge von ca. 22 bis 32 cm, mit Garantie



Einschlauchgerät Pro 1

weißes, extra großes Manometer, Skalendurchmesser: ca. 60 mm, Skalierung bis 300 mmHg, sicheres und robustes Kunststoffgehäuse, Nylon-Klettmanschette (ca. 51 x 14 cm) für Armumfänge von ca. 22 bis 32 cm, mit eingravierter Seriennummer und Garantie



XL-Armmanschetten

Nylon-Klett-Manschetten für extra große Armumfänge von ca. 32 bis 48 cm), kompatibel zu unseren Ein- und Zweischlauchgeräten

Schon gewusst?

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (kurz MPBetreibV) Anlage 2 schreibt für die Kontrolle von Blutdruckmessgeräten eine Frist von 2 Jahren vor. Der Fristbeginn wird in §14, Abschnitt 4 bestimmt: „Die Fristen beginnen mit Ablauf des Jahres, in dem die Inbetriebnahme des Medizinproduktes erfolgte oder die letzte messtechnische Kontrolle durchgeführt wurde.“ Entscheidend ist somit nicht das Herstellungsdatum des Geräts, sondern der Zeitpunkt der Erstinbetriebnahme.

Blutdruckmessgeräte

Ausführung	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Gold 1	10000066-G1	1 Stück	50 Pack	-	7589763
Gold 2	10000066-G2	1 Stück	50 Pack	-	8443501
Pro 1	10000066-Pro	1 Stück	50 Pack	-	-
XL-Manschette 1-Schlauch	10000066-XL1	1 Stück	-	-	9328593
XL-Manschette 2-Schlauch	10000066-XL2	1 Stück	-	-	9328587

Infrarot-Fieberthermometer

auf die Stirn gerichtet kann es die Temperatur schnell, genau und kontaktlos messen, zwei unterschiedliche auswählbare Modi (Messung der Körpertemperatur oder der Oberflächentemperatur), auswählbare Einheiten (°C/°F), einstellbarer Alarmwert, LED-beleuchtetes Display, Speicherung von 32 Messungen, mit Aufbewahrungstasche und Batterien



Infrarot-Fieberthermometer

Ausführung	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Infrarot-Fieberthermometer	10001030	1 Stück	-	-	-

Fieberthermometer

Messbereich: 32 bis 41,9 °C, Messgenauigkeit: im Bereich 35 bis 39 °C ± 0,1; im Bereich unter 35 °C und über 39 °C ± 0,2; Batterie 1,5 V, in transparenter Kunststoff-Schutzhülle, ca. 12,5 cm lang



Fieberthermometer

Ausführung	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
feste Spitze	10000065-fest	1 Stück	50 Pack	-	-

Diagnostikleuchten

eloxiertes Aluminiumgehäuse, helle Lichtquelle (Glühlampe), zur Augen- und Rachendiagnostik geeignet, Reflektor für optimale Lichtausbeute, Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter, inklusive Batterien



Diagnostikleuchten

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
rot	10000043-rot	1 Stück	50 Pack	-	-
blau	10000043-blau	1 Stück	50 Pack	-	-
grün	10000043-grün	1 Stück	50 Pack	-	-
silber	10000043-silber	1 Stück	50 Pack	-	-
schwarz	10000043-schwarz	1 Stück	50 Pack	-	-

EKG-Elektroden

Einmalelektroden mit Gelpunkt (Festgel, ca. Ø 43 mm) bzw. Schaumstoff (Nassgel, ca. Ø 48 mm), Ag/AgCl-Sensor, Druckknopf, latex- und PVC-frei



EKG-Elektroden

Ausführung/Größe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Festgel/Ø 43 mm	10000098	50 Stück	20 Pack	100 Karton	6839301
Nassgel/Ø 48 mm	10000099	30 Stück	20 Pack	80 Karton	9328699

Elektrodenspray

für exakte Signalübertragung, hautfreundlich, fettfrei, viskos, auf Wasserbasis, formaldehydfrei



Elektrodenspray

Gebinde	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
250-ml-Spray	10000042	1 Stück	60 Pack	-	6839324

Ultraschallgel

für exakte Signalübertragung, hautfreundlich, fettfrei, viskos, auf Wasserbasis, formaldehydfrei, zur Ultraschall- und Reizstromanwendung



Ultraschallgel

Gebinde	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
250-ml-Flasche	10000038-250	1 Stück	60 Pack	-	6839287
1000-ml-Flasche	10000038-1000	1 Stück	20 Pack	-	6839270
5-Liter-Cubitainer	10000038-5000	1 Stück	4 Pack	-	6839258

Pulsoximeter CMS 50 DL

misst den Sauerstoffgehalt im Blut und den Puls, einfache Messung (One-Touch-System) am Finger, kontraststarkes LED-Display mit roter Anzeige, Batterie-standanzeige, Puls-Balkenanzeige, Anzeige des Sauerstoffgehalts im Blut: 70 bis 99 %, Herzfrequenz: 30 bis 250 BPM, Genauigkeit: +/- 2 %, Energieversorgung: 3 Volt mit 2 x AAA Batterien (beiliegend), Einsatz-Temperaturbereich/Umgebung: 5 bis 40

°C, Lagerung: -10 bis 40°C, CE-zertifiziert (TÜV Süd), deutsch- und englischsprachige Bedienungsanleitung, Konformität: EMC IEC60601-1-1-2 (standard), Maße (L x B x H): ca. 58 x 32 x 34 mm, Gewicht: ca. 50 g (inkl. Batterien), Silikonhülle (Stoßschutz), Nylontrageband, Tasche mit Klettverschluß und Gürtelbefestigung, 2 x 1,5 V Alkaline Micro Batterien (AAA/LR03)



Pulsoximeter CMS 50 DL

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
blau	10000083-blau	1 Stück	-	-	-
schwarz	10000083-schwarz	1 Stück	-	-	-

Pulsoximeter Gold 2

mit kontraststarkem 2-farbigem OLED Display, für Erwachsene und Kinder, einfache Messung des Sauerstoffgehaltes (SPO2) und des Pulses am Finger (One-Touch-System), Diagrammanzeige und automatische Display-Sicht-Umschaltung, Anzeige des Batteriestands, Puls-Balkenanzeige, Anzeige des Sauerstoffgehaltes im Blut: 70 bis 99 %, Herzfrequenz: 30 bis 240

BPM, einstellbare Alarmgrenzen, Energieversorgung: 3 Volt mit 2 x AAA Batterien (beiliegend), Einsatz-Temperaturbereich/Umgebung: 5 bis 40 °C, Lagerung: -10 bis 40 °C, schwarz/weiß, Maße (L x B x H): ca. 58 x 31 x 35 mm, Gewicht: ca. 54 g (inkl. Batterien), Zubehör: 2 x 1,5 V Alkaline Micro Batterien (AAA/LR03), Trageband, Bedienungsanleitung



Pulsoximeter Gold 2

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
schwarz/weiß	10000087	1 Stück	-	-	-

Pulsoximeter CMS 50 D

misst den Sauerstoffgehalt im Blut und den Puls, einfache Messung (One-Touch-System) am Finger, kontraststarkes, sehr gut lesbares OLED-Display, Batteriestandanzeige, Puls-Balkenanzeige, Anzeige des Sauerstoffgehalts im Blut: 70 bis 99 %, Herzfrequenz: 30 bis 250 BPM, Genauigkeit: +/- 2 %, Energieversorgung: 3 Volt mit 2 x AAA Batterien (beiliegend), Einsatz-Temperaturbereich/Umge-

bung: 5 bis 40 °C, Lagerung: -10 bis 40 °C, CE-zertifiziert (TÜV Süd), Bedienungsanleitung (Deutsch und Englisch), Konformität: EMC IEC60601-1-1-2 (standard), Maße (L x B x H): ca. 58 x 32 x 34 mm, Gewicht: ca. 50 g (inkl. Batterien), Zubehör: Silikonhülle zum Schutz vor Stößen, Nylontrageband, Tasche mit Klettverschluß und Gürtelbefestigung, 2 x 1,5 V Alkaline Micro-Batterien



Pulsoximeter CMS 50 D

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
blau	10000084-blau	1 Stück	-	-	-
schwarz	10000084-schwarz	1 Stück	-	-	-

Mit Pulsoximetrie den Blutsauerstoffgehalt messen

Im Rahmen der Pulsoximetrie ist es technisch möglich, den Sauerstoffgehalt im Blut ohne Punktierung eines Blutgefäßes zu messen. Somit verursacht diese Form der Messung keinerlei Schmerzen beim Patienten. Die Messung ergibt einen SpO²-Wert in Prozent, der aussagt wie hoch der Anteil des mit Sauerstoff beladenen Hämoglobins (rote Blutkörperchen) am gesamten Blut ist. Diese Angabe stellt eine Schätzung der Sauerstoffsättigung, also der Konzentration von Sauerstoff, des Blutes dar. „S“ steht dabei für „Sättigung“, „O“ für „Sauerstoff (engl. oxygen) und „p“ für „pulsoximetrische Messmethode“.

Das Messprinzip dahinter ist optischer Natur, nämlich, dass sauerstoffbeladenes (oxigeniertes) Blut im Vergleich zu sauerstoffunbeladenem (desoxigeniertem) Blut einen anderen Absorptionsverlauf in bestimmten Wellenbereichen des Lichts hat. Die Lichtquelle des Pulsoximeters leuchtet demnach in zwei genau festgelegten Bereichen. Der Sensor

des Fingerpulsoximeters ist auf zwei Lichtwerte plus einen Referenzwert eingestellt. Das sichtbar rote Licht mit einer Wellenlänge von 660 nm für oxigeniertes Hämoglobin HbO², das infrarote Licht im Bereich von 940 nm für Desoxihämoglobin HbO. Als dritten Wert wird zur Referenz das Tageslicht genommen. Anhand der Absorption, also wie viel Licht am Sensor ankommt, misst das Gerät wie hoch die Sättigung der einzelnen Werte ist. Im Vergleich mit einer Referenztafel errechnet das Gerät, wie hoch der prozentuale Anteil roten Blutkörperchen ist, die mit Sauerstoff gesättigt sind.

Der normale Sauerstoffgehalt im Blut beträgt 95 bis 100 %. Zwischen 90 und 95 % gilt ein Sauerstoffgehalt im Blut als niedrig, wobei dies jedoch nicht unbedingt ein Anzeichen für ein gesundheitliches Problem sein muss. Wir empfehlen die Verwendung eines Pulsoximeters generell nur zur allgemeinen Kontrolle, die eine professionelle Messung durch geschultes Personal lediglich begleiten sollte.

Bewegungstrainer

Bewegungstrainer für Arme und Beine, Schwierigkeitsgrad über Schraube individuell einstellbar, mit rutschfesten Gummifüßen, regelmäßig angewendet ideal zum Aufbau und zur Stärkung von Muskulatur und Gelenken, bequeme Verwendung zu Hause oder im Büro, zusätzlicher Mini-Computer (zum Ablesen von Zeit, Strecke, Kalorienverbrauch, Umdrehungen), noch schneller einsatzbereit durch praktischen Faltmechanismus, stabiles Stahlrohr, Maße (L x B x H): ca. 50 x 42 x 28 cm, Gewicht: ca. 4 kg



Bewegungstrainer

Ausführung	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
digital	10000081	1 Stück	8 Pack	-	-

Nagelschleifgerät

Nagelschleifgerät für Pediküre und Maniküre, mit viel Zubehör, ideal für den mobilen und stationären Einsatz, vibrationsarmes, leises Gerät, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung (0-20.000 Umdrehungen/Minute), die Schleifaufsätze lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug wechseln, kompatibel mit allen üblichen Schleifern, Lieferumfang: 1 Motorteil, 1 Handstück, 1 Ablage für das Handstück, 30 Diamantschleifer, 5 Stahlschleifer, 1 Schleifkappenträger, 5 Schleifkappen



Nagelschleifgeräte

Ausführung	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Set pink	10000088	1 Stück	20 Pack	-	-

Schwesternuhren Smiley

mit Clip, Typ Smiley

Quarzuhrwerk mit Sekundenzeiger, großes Display zum leichten Ablesen der Zeit, als Pulsuhr geeignet, fluoreszierende Zeiger, mit Batterieschutzventil, Clip zur leichten Befestigung an der Arbeitskleidung, verpackt in einer Luftpolstertüte, Display-Durchmesser: ca. 25 mm, Länge der Uhr: ca. 86 mm



mit Clip, Typ Smiley Special

zusätzlich 2 kleine Smileys an der Kette

mit Clip, Typ Smiley Heart

Clip im Herz-Design, zusätzlich 2 kleine Smileys an der Kette



Schwesternuhren Smiley

Ausführung/Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
Smiley hellblau	10000069-hblau	1 Stück	50 Pack	-	9254179
Smiley rosa	10000069-rosa	1 Stück	50 Pack	-	9254185
Smiley grün	10000069-grün	1 Stück	50 Pack	-	9254191
Smiley orange	10000069-orange	1 Stück	50 Pack	-	9254216
Smiley weiß	10000069-weiß	1 Stück	50 Pack	-	9328564
Smiley gelb	10000069-gelb	1 Stück	50 Pack	-	-
Smiley rot	10000069-rot	1 Stück	50 Pack	-	-
Smiley violett	10000069-violett	1 Stück	50 Pack	-	-
Smiley dunkelblau	10000069-dblau	1 Stück	50 Pack	-	-
Smiley schwarz	10000069-schwarz	1 Stück	50 Pack	-	-
Special hellblau	10000070-hblau	1 Stück	50 Pack	-	-
Special rosa	10000070-rosa	1 Stück	50 Pack	-	-
Special violett	10000070-violett	1 Stück	50 Pack	-	-
Special rot	10000070-rot	1 Stück	50 Pack	-	-
Special gelb	10000070-gelb	1 Stück	50 Pack	-	-
Special weiß	10000070-weiß	1 Stück	50 Pack	-	-
Special grün	10000070-grün	1 Stück	50 Pack	-	-
Heart hellblau	10000071-hblau	1 Stück	50 Pack	-	-
Heart rot	10000071-rot	1 Stück	50 Pack	-	-
Heart rosa	10000071-rosa	1 Stück	50 Pack	-	-
Heart gelb	10000071-gelb	1 Stück	50 Pack	-	-
Heart grün	10000071-grün	1 Stück	50 Pack	-	-
Heart weiß	10000071-weiß	1 Stück	50 Pack	-	-
Heart violett	10000071-violett	1 Stück	50 Pack	-	-

Schwesternuhren Silikon Typ 2

Qualitäts-Quarzuhrwerk mit Sekundenzeiger, großes Display mit Smiley zum leichten Ablesen der Zeit, als Pulsuhr geeignet, fluoreszierende Zeiger, mit Batterieschutzventil, die Silikonhüllen schützen das Uhrwerk, Anstecknadel zur leichten Befestigung an der Arbeitskleidung, verpackt in einer Luftpolstertüte, Display-Durchmesser: ca. 25 mm, Länge der Uhr: ca. 86 mm



Schwesternuhren Silikon Typ 2

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
einfarbig rosa	10000068-rosa	1 Stück	50 Pack	-	6839117
einfarbig orange	10000068-orange	1 Stück	50 Pack	-	6839123
einfarbig hellblau	10000068-hblau	1 Stück	50 Pack	-	9102392
einfarbig schwarz	10000068-schwarz	1 Stück	50 Pack	-	9102400
einfarbig rot	10000068-rot	1 Stück	50 Pack	-	9328541
einfarbig grün	10000068-grün	1 Stück	50 Pack	-	9328535
einfarbig violett	10000068-violett	1 Stück	50 Pack	-	-
einfarbig weiß	10000068-weiß	1 Stück	50 Pack	-	-
einfarbig dunkelblau	10000068-dblau	1 Stück	50 Pack	-	-
einfarbig gelb	10000068-gelb	1 Stück	50 Pack	-	-
Blumenmuster	10000068-D1	1 Stück	50 Pack	-	-
Kreismuster	10000068-D2	1 Stück	50 Pack	-	-
Raupenmuster	10000068-D3	1 Stück	50 Pack	-	-
Leopardmuster	10000068-D4	1 Stück	50 Pack	-	-

Schwesternuhren Silikon Typ 2 Sparsets

zusätzlich zum Uhrwerk (siehe oben) sind 5, 8 oder 10 einfarbige bzw. 9 gemusterte Hüllen im Set enthalten



Schwesternuhren Silikon Typ 2 Sparsets

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
unifarben, 1 Uhr/5 Hüllen	10000072-5	1 Stück	50 Pack	-	-
unifarben, 1 Uhr/8 Hüllen	10000072-8	1 Stück	50 Pack	-	9328529
unifarben, 1 Uhr/10 Hüllen	10000072-10	1 Stück	50 Pack	-	-
gemustert, 1 Uhr/9 Hüllen	10000072-9	1 Stück	50 Pack	-	-

Schwesternuhren Dreiecks-Clip Typ 1

quarzgenau mit Sekundenzeiger, fluoreszierende Zeiger, großes Display zum leichten Ablesen der Zeit, als Pulsuhr geeignet, mit Batterieschutzventil, Clip zur Befestigung an der Arbeitskleidung, verpackt in einer schönen silbernen Geschenkdose, Display-Durchmesser: ca. 21 mm, Länge der Uhr: ca. 88 mm



Schwesternuhren Dreiecks-Clip Typ 1

Farbe	Artikel-Nr.	Pack	Karton	Palette	PZN
orange	10000073-orange	1 Stück	50 Pack	-	6839086
grün	10000073-grün	1 Stück	50 Pack	-	6839092
dunkelblau	10000073-dblau	1 Stück	50 Pack	-	6839100
rot	10000073-rot	1 Stück	50 Pack	-	9102386
violett	10000073-violett	1 Stück	50 Pack	-	-



ZUSATZINFORMATIONEN

LEISTUNGSSTUFEN, NORMEN, PIKTOGRAMME

Im Medizin- und Pflegebereich gilt es eine Vielzahl an Verordnungen, Vorgaben und Richtlinien zu beachten und einzuhalten. Bezüglich unserer Produkte sind wir als sogenannter Inverkehrbringer medizinischer Einmalprodukte selbstverständlich dazu verpflichtet, uns an diesem Ordnungsrahmen zu orientieren und die entsprechenden Bestimmungen einzuhalten. Nachfolgend geben wir einen Überblick über die für unsere Produkte verpflichtenden Prüfnormen, Leistungsstufen und Symbole.





DIN EN 455 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Dichtheit

Teil 2: Anforderungen und Prüfung der physikalischen Eigenschaften

Teil 2 von EN 455 legt Anforderungen und Prüfmethode der physikalischen Eigenschaften medizinischer Handschuhe zum einmaligen Gebrauch (das heißt Operationshandschuhe und Untersuchungs-/Behandlungshandschuhe) fest, um sicherzustellen, dass bei Gebrauch ausreichender Schutz vor Kontamination für Patient und Anwender gewährleistet und aufrechterhalten wird.

Teil 3: Anforderungen und Prüfung für die biologische Bewertung

Teil 3 von EN 455 legt Anforderungen für die Bewertung der biologischen Sicherheit von medizinischen Einmalhandschuhen als Teil des Risikomanagements in Übereinstimmung mit EN ISO 10993 fest. Er enthält Anforderungen an die Kennzeichnung und die Informationsangaben entsprechend der angewendeten Prüfmethode.

DIN EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

Die Anwender, die in Herstellung, Gebrauch, Transport und Notfalleinsatz flüssiger Chemikalien involviert sind, können einer Vielzahl von Verbindungen ausgesetzt werden, die durch Berührung mit dem menschlichen Körper Verletzungen verursachen können. Die schädlichen Wirkungen dieser chemischen Stoffe können von akutem Trauma, wie beispielsweise Hautreizungen und Verbrennungen, bis zu chronischen Krankheiten, zum Beispiel Krebs, führen. Weil technische Kontrollen nicht sämtliche Gefährdungen ausschließen können, wird das Augenmerk häufig auf die Verminderung eines möglichen direkten Kontakts der Haut durch den Gebrauch von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gerichtet, die gegen Permeation, Durchdringung und Zersetzung beständig ist.

Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen

Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration

Diese Norm dient als Grundlage für das Inverkehrbringen von Chemikalienschutzkleidung unter der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung. Penetration bezeichnet in diesem Kontext das Eindringen einer Chemikalie und/oder eines Mikroorganismus (auf nicht molekularer Ebene) durch poröse Stellen, Nähte, Nadellöcher oder andere Defekte in einen Schutzhandschuh.

Teil 3: Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation von Chemikalien

Das in diesem Teil beschriebene Prüfverfahren ist für die Beurteilung der Wirksamkeit von Sperrschichten der Materialien vorgesehen, aus denen Schutzkleidungsmaterial, Schutzhandschuh- und Fußschutzmaterial gegen das Eindringen von flüssigen chemischen Stoffen hergestellt werden. Permeation meint in diesem Zusammenhang die Durchbruchzeiten, die eine gefährliche Flüssigkeit bis zum Hautkontakt benötigt. Die Gummi- und Kunststoffschichten eines Handschuhs bilden nicht immer eine Flüssigkeitsbarriere. Manchmal reagieren sie wie ein Schwamm, indem sie Flüssigkeit aufsaugen und gegen die Haut drücken. Daher ist es wichtig, die Permeation zu ermitteln.



J K L

Dieses Piktogramm erhalten Handschuhe, die einen Permeationstest gegen 3 von 12 in der Norm festgelegten Chemikalien absolviert haben und mindestens 30 Minuten beständig sind. Geprüfte Chemikalien für unsere Handschuhe: n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 %



Bei Handschuhen, die mindestens ein akzeptiertes Qualitätsniveau (AQL) von 4,0 gemäß definierter Musterprüfung nach der Produktion erreichen, geht man davon aus, dass diese gegen Mikroorganismen beständig sind.

DIN EN 1186 Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln



Diese Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für Werkstoffe und Gegenstände, insbesondere Kunststoffe, in Kontakt mit Lebensmitteln fest und befasst sich vornehmlich mit der Migration von Kunststoffbestandteilen dieser Werkstoffe und Gegenstände in die entsprechend im Kontakt befindlichen Lebensmittel. Unsere Handschuhe sind nach den Ergebnissen dieser Prüfung für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Der Einsatzbereich für unsere Vinylhandschuhe schließt lediglich den Umgang mit fettenden Lebensmitteln aus.

AQL 1,5 Accepted Quality Level

Für das AQL (dt. annehmbare Qualitätsgrenzlage) wird in genau definierter Vorgehensweise aus einer Gesamtmenge an erzeugten Waren eine bestimmte Teilmenge für eine Stichprobe zur Verfügung gestellt. Diese Stichprobe wird gemäß der festgelegten Normen und Spezifikationen geprüft. Aus dem dabei gewonnenen Resultat lassen sich dann Rückschlüsse auf die Qualität der Gesamtmenge ziehen. Je höher die Anforderungen an ein Produkt sind, desto strenger sind selbstverständlich die vorgegebenen Richtlinien. Der AQL ist daher ein statistisches Verfahren zur Qualitätsbestimmung. Für medizinische Handschuhe muss ein AQL von unter 0,65 bzw. 1,5 eingehalten werden.

DIN EN ISO 22612 Schutzkleidung gegen infektiöse Agenzien

Die Norm legt ein Prüfverfahren zur Beständigkeit von Schutzkleidung gegen mikrobielle Penetration im trockenen Zustand fest. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass Bakterien auf luftgetragenen organischen oder anorganischen Partikeln im trockenen Zustand Barriere-Materialien durchdringen können. Die Trockenpenetration von bakterientragenden Hautschuppen durch OP-Mäntel oder Rein-Raum-Kleidung ist ein Beispiel dafür. Die Penetration von Verpackungsmaterial während der Lagerung ist ein anderes. In der Norm ist ein Prüfverfahren mit der dazugehörigen Prüfausrüstung beschrieben, das verwendet werden kann, um die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen die Trockenpenetration durch partikelgetragene Bakterien zu bestimmen. Die Partikelgröße ist typisch für menschliche Hautschuppen.

RL 93/42/EWG Medizinprodukterichtlinie

RL 93/42/EWG wird in Deutschland kurz als Medizinprodukterichtlinie bezeichnet und ist das wichtigste Regelungsinstrument zum Nachweis der Sicherheit und der medizinisch-technischen Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten im Europäischen Wirtschaftsraum. Medizinprodukte im Sinne der Richtlinie sind alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe oder anderen Gegenstände, einschließlich der für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinprodukts eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen für designierte Zwecke bestimmt sind. Medizinprodukte müssen für Patienten, Anwender und Dritte einen hochgradigen Schutz bieten und die vom Hersteller angegebenen Leistungen erreichen. Die Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des in den Mitgliedstaaten erreichten Schutzniveaus ist eines der wesentlichen Ziele dieser Richtlinie.

DIN EN 14683 Medizinische Gesichtsmasken

Diese Norm legt konstruktive Gestaltung, Leistungsanforderungen sowie Prüfverfahren für medizinische Gesichtsmasken fest, die dazu dienen, die Übertragung infektiöser Keime vom Personal auf Patienten und während chirurgischer Eingriffe in Operationssälen und sonstigen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen zu begrenzen. Eine medizinische Gesichtsmaske mit einer geeigneten mikrobiologischen Barriere kann ebenso hinsichtlich der Verringerung von Absonderungen infektiöser Keime aus Mund und Nase eines asymptomatischen Trägers oder eines Patienten mit klinischen Symptomen wirksam sein. Demnach ist die hauptsächlich vorgesehene Verwendung medizinischer Gesichtsmasken der Schutz des Patienten gegen infektiöse Keime und auch der Schutz des Trägers gegen Spritzer unter Umständen kontaminierter Flüssigkeiten und/oder Mikroorganismen.

FFP Atemschutzmasken

Partikelfiltrierende Halbmasken (Feinstaubmasken oder auch Staubmasken) schützen je nach Ausführung vor dem Einatmen von wässrigen oder öligen Aerosolen und Partikeln. Sie bieten jedoch keinen Schutz vor Gasen und Dämpfen. Die Masken mit Prü fzertifizierung schützen bei sachgerechter Anwendung zuverlässig vor lungengängigen Stäuben und Flüssigkeitsnebeln innerhalb ihres jeweiligen Anwendungsbereichs. Sie besitzen zusätzlich zum stützenden Filtermaterial Lagen aus einem elektrostatischen Material (Elektret). Hierbei werden kleine Staubpartikel und Flüssigkeitstropfen durch elektrostatische Kräfte gebunden. Allerdings geht die elektrostatische Wirkung durch Staubanlagerung nach einiger Zeit zurück, sodass es zu einer merklichen Steigerung des Atemwiderstandes kommt. Sofern nicht vom Hersteller anders angegeben sind sie daher grundsätzlich für einmalige Nutzung für maximal einen Arbeitstag von acht Stunden vorgesehen. Eine Klassifikation wird nach der europäischen Norm EN 149 in drei Klassen vorgenommen. Zur Beurteilung dient die Gesamtleckage einer Maske, welche sich aus Undichtigkeitsstellen am Gesicht, der Leckage am Ausatemventil (wenn vorhanden) sowie aus dem eigentlichen Filterdurchlass zusammensetzt. Die folgende Übersicht dient lediglich zur Information und als Empfehlung, entbindet den Kunden jedoch nicht von der eigenen Prüfung der Masken auf ihre Eignung für die jeweilig beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Wir übernehmen keine Haftung.

Tätigkeitsbereich	Schutzstufe
Allgemeine Arbeiten, wie z.B. Haushalts- und Gartenarbeit	FFP 1
Arbeiten mit Heu und Futtermitteln	FFP 2
Arbeiten mit Isolier- und Dämmwolle	FFP 3
Schleifarbeiten mit Farbe, Metall, Rost, Beton, Kunststoff, Zement, Holz und Stahl	FFP 2
Schleifarbeiten mit Edelstahl, Rostschutz und Lack	FFP 3
Schweißen von Baustahl, Zink und Edelstahl	FFP 2
Maschinenarbeiten: Bohren, Sägen, Fräsen und Hobeln	FFP 2
Reinigungsarbeiten mit Staubaufkommen	FFP 2
Entfernen von Pilzen, Schimmel und Glasfasertapeten	FFP 3
Spritzen/Streichen mit Farbe bzw. Lacken	FFP 2

Die im Katalog genannten Leistungsstufen entsprechen dem Stand von März 2017. Im Laufe der Gültigkeit des Kataloges können sich diese Leistungsstufen u.U. ändern. Wir geben Ihnen bei Rückfragen zur Aktualität jederzeit gern Auskunft.



Folgen Sie uns auf Facebook...



TIGA-MED[®]
DEUTSCHLAND GMBH

Heidelbergweg 9 | 07580 Ronneburg

Telefon: 036602 509645 | **Fax:** 036602 511981

Email: info@tiga-med.de | **Web:** www.tiga-med.de